




SMARTY[®]
SAVER SERIES

SMARTY SAVER
Series

La tecnologia SMARTY per migliorare l'accessibilità dei DAE

SMARTY[®]
SAVER**SERIES**

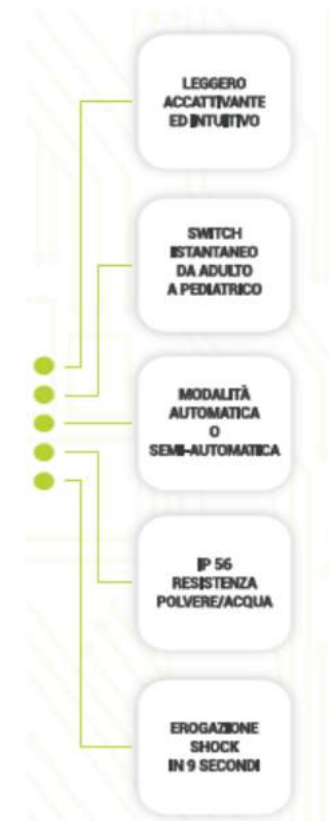

La serie Smarty Saver è la nuova linea di defibrillatori AMI Italia nata per soddisfare tutti i requisiti di un moderno DAE: progettata per essere affidabile, semplice e facile da utilizzare da chiunque, che sia addestrato o meno.

SMARTLY SAVER



Semplice e
facile da usare da chiunque

Disponibili in versione AUTOMATICA e SEMI-AUTOMATICA

SMARTY[®] SAVERSERIES

1

- Il DAE Semi-Automatico analizza il tracciato ECG del paziente

2

- Se rileva un ritmo defibrillabile inizia automaticamente a caricare il condensatore

3

- La voce guida indicherà all'operatore di premere il pulsante di scarica per erogare la defibrillazione.

VERSIONE
SEMI-AUTOMATICA



SMARTLY[®] SAVERSERIES

1

• Il DAE Automatico analizza il tracciato ECG del paziente


2

• Se rileva un ritmo defibrillabile la voce guida avviserà il soccorritore dell'imminente erogazione della scarica

3

• Dopo 5 secondi il DAE rilascerà automaticamente la scarica

VERSIONE
AUTOMATICA

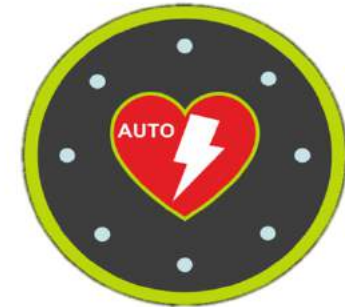


SMARTCY SAVER

- **DEFIBRILLATORE**

- Energia Massima: 200J (nominale)
- Forma d'onda: Bifasica troncata esponenziale (BTE) adattiva automaticamente in funzione dell'impedenza del paziente.
- Protocollo di scarica: Adulto: incrementale prima scarica 150J – successive 200J
Pediatico: fissa 50J

- **BATTERY**

- Batteria monouso Li-MnO₂
- Tensione/Capacità: 12VDC-3000mAh
- Autonomia: fino a 200 cicli di soccorso completi (shock a 200 J + RCP);
Fino a 36 ore continue di analisi ECG

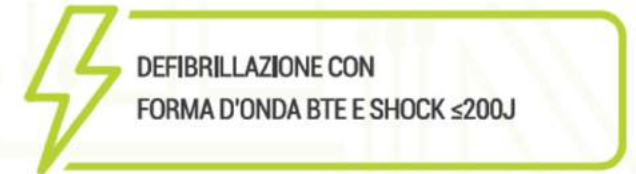

Disponibili in due possibili configurazioni:




- **Configurazione STANDARD:**
Con elettrodi monouso **UNIVERSALI**, pre-gelati e pre-connessi.

GRANDE BENEFICIO – FACILE DA USARE

- **CONFIGURATION FACE to FACE:**
Con elettrodi monouso **UNIVERSALI** pre-gelati e pre-connessi **FACE-to-FACE**.

Elettrodi Face-to-face:

Collegati al DAE, consentono al dispositivo di misurarne l'efficacia in base alla qualità della conducibilità del gel ed avvisare, tramite LED di controllo, quando sono prossimi alla scadenza.

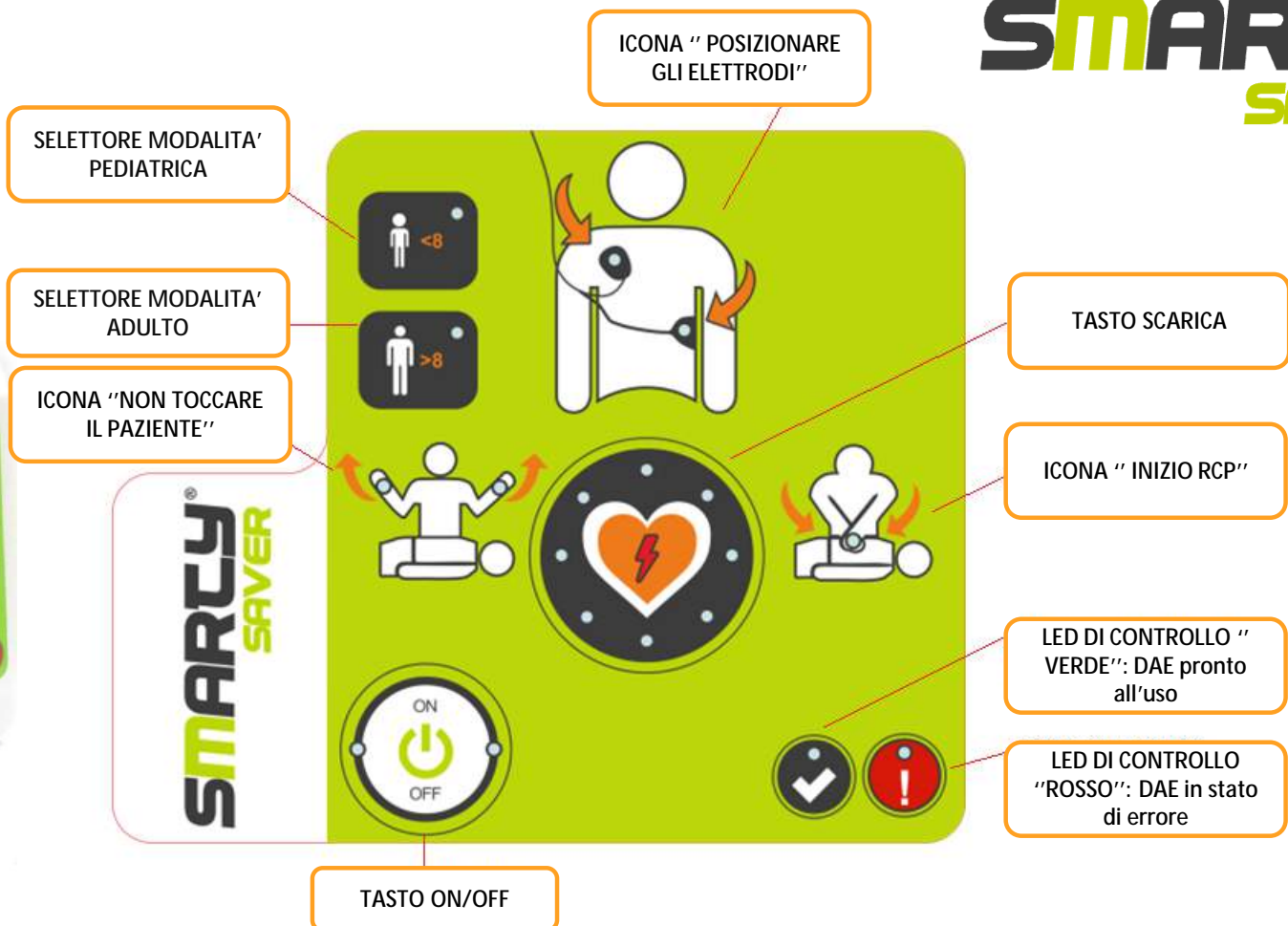

Nella versione automatica il pulsante Shock è sostituito dall'icona Auto Shock



SMARTCY[®] SAVERSERIES

ALLA PORTATA DI TUTTI!

www.amiitalia.com

5 YEARS CE
WARRANTY
Manufactured in Italy 1282

